


TRDF-Prüfmodul - Kurzanleitung

Die Bilder zeigen die Beispielserie 2026B051 mit erfundenen Werten.

1. Starten und anmelden

1. **Doppelklick** auf `TRDF-Pruefmodul-x86.exe`. Eine Installation ist nicht nötig.
2. Mit den **LIMS-Anmeldedaten** anmelden:
 - **Oracle-Benutzer** – in der Regel der Nachname
 - **Passwort**
 - **Datenbank** – steht fest auf `LIMS`
3. **Anmelden** klicken. Der Benutzername wird gemerkt, das Passwort nie.

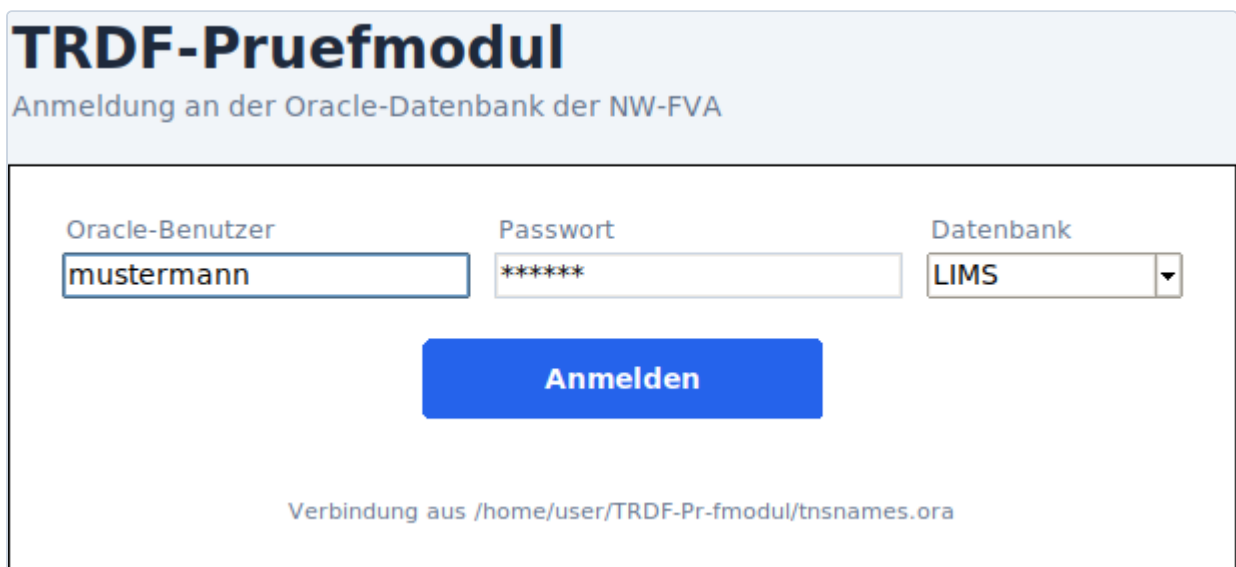

TRDF-Pruefmodul
Anmeldung an der Oracle-Datenbank der NW-FVA

Oracle-Benutzer: mustermann

Passwort: *****

Datenbank: LIMS

Anmelden

Verbindung aus /home/user/TRDF-Pr-fmodul/tnsnames.ora

2. Serie abfragen

1. **Serie** aus der Liste wählen oder eintippen.
2. **Abfragen** klicken.
 - Führt die Serie **eine** TRDF-Methode, wird sie sofort geladen.
 - Führt sie **mehrere**, die gewünschte unter **Untersuchungsmethode** wählen. Die Auswahl lädt die Serie.

TRDF-Pruefmodul
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)
Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen
Load backup
Export

Serie
Abfragen
Untersuchungsmethode
UM einfügen ...
Rohwerte aus: LIMS

Die Serie 2026B051 fuehrt 2 TRDF-Methoden (TRDF3.2 (UM 42), TRDF3.2 (UM 207)) - bitte eine waehlen.

Rohwerte
Ergebnisse
Pruefung
Exportbericht

Rohwertblatt CSV
Aenderungen CSV
☐ nur Eintraege mit Bewertung
Info
Maximieren
Anhang angleichen
Berechnete Groessen

Danach stehen Methode und Probenart oben neben der Überschrift. Die Statuszeile darunter sagt, was gerade passiert.

TRDF-Pruefmodul
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)
Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen
TRDF3.2 | Probenart Boden
Load backup
Export

Serie
Abfragen
Untersuchungsmethode
UM einfügen ...
Rohwerte aus: LIMS

Serie 2026B051 - TRDF3.2, 4 Proben, 13 berechnete Groessen, 16 Rohwerte

Rohwerte
Ergebnisse
Pruefung
Exportbericht

Rohwertblatt CSV
Aenderungen CSV
☐ nur Eintraege mit Bewertung
Info
Maximieren
Anhang angleichen
Berechnete Groessen
4 von 4 Proben mit sauber

Zeile	Probe	_TRDV	_TSM	FBLFL	VOLSZ	GMSZ	GBMSZ	MSchaufel	GBM63Schaufel	GBM263Schaufel	GBMSchaufel	MM
1	26B0001	2	30	x	400	574	6,36	x	x	x	x	
5	26B0005	4	30	1	500	834,3	24,99	7938,1	641,42	660,42	x	
11	26B0011	7	30	1	x	x	x	7317,7	419,1	4401,49	x	
33	26B0033	5	50	1	x	x	x	5047,3	0	1254,51	392,17	

3. Werte im LIMS noch nicht gespeichert? UM einfügen

Sind die Rohwerte im LIMS noch nicht gespeichert, kommen sie aus der Probenvorbereitung:

1. In der Probenvorbereitung **aktueller Block** → **kopieren**.
2. Im Prüfmodul oben rechts „**UM einfügen ...**“ klicken. Es öffnet sich ein eigenes Fenster.
3. Mit **Strg+V** einfügen und **Uebernehmen** klicken.

In der Probenvorbereitung „aktueller Block“ -> kopieren, hier mit Strg+V einfügen, dann „Uebernehmen“ - danach wird mit dieser Liste gerechnet. „Leeren“ schaltet zurück auf die Rohwerte aus dem LIMS.

Serie: 2026B051 Untersuchungsmethode: TRDF3.2

LNR	Probe-Nr.	Variante	Tiefenstufen	maechtigkeit	Faktor	Bergland	Flachland	Volumen	Stechzylinder	...
1	26B0001	2	30	x	400	...				
5	26B0005	4	30	1	500	...				

Uebernehmen Leeren Schliessen

Danach

- wird **mit den eingefügten Werten gerechnet**; oben rechts steht „Rohwerte aus: eingefuegter UM“,
- sind die Werte, die im LIMS noch fehlen, **rot** für den **Export** vorgemerkt (Abschnitt 7),
- lassen sich alle Werte noch **ändern** (Abschnitt 4).

Gut zu wissen:

- Werte, die schon im LIMS stehen, werden nicht überschrieben; weicht die eingefügte UM davon ab, ist die Zelle **amber** markiert.
- **Leeren** im Fenster schaltet zurück auf die Rohwerte aus dem LIMS.
- Der eingefügte Inhalt bleibt erhalten, auch wenn das Fenster geschlossen wird.

4. Werte ändern - wie in Excel, mit Live-Rechnung

- Im Reiter **Rohwerte** eine Zelle anklicken und tippen. Der alte Inhalt ist markiert und wird überschrieben.
- **Tab** geht nach rechts, **Pfeile** in alle Richtungen, **Eingabe** eine Zeile tiefer.
- Jede Änderung wird **sofort neu gerechnet**.
- „**► Berechnete Groessen**“ klappt über den Rohwerten die berechneten Größen auf. Die Grenze dazwischen lässt sich ziehen.

TRDF-Pruefmodul pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat) Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen i TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie Abfragen Untersuchungsmethode Load backup Export

UM einfügen ... Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte Ergebnisse Pruefung Exportbericht

Rohwertblatt CSV **Aenderungen CSV** ☐ nur Eintraege mit Bewertung Info Maximieren Anhang angleichen Berechnete Groessen i i 4 von 4 Proben mit sauber

Berechnete Groessen i Blatt als CSV

Zeile	Probe	FBMMini LIMS	FBMMini ber.	FBMSZ LIMS	FBMSZ ber.	FBMSchaufel LIMS	FBMSchaufel ber.	VOLGB63gs LIMS	VOLGB63gs ber.	TRD_TRDF LIMS	TR
1	26B0001	x	x	565,9	565,9	x	x	x	x	1,423	1,
5	26B0005	x	x	798,8	814,3	6549,7	6549,7	10,0	10,0	1,635	1,
11	26B0011	x	x	x	x	2467,3	2467,3	50,0	50,0	1,800	1,
33	26B0033	785,8	785,8	x	x	3738,1	3738,1	9,0	9,0	1,508	1,

Zeile	Probe	_TRDV	_TSM	FBLFL	VOLSZ	GMSZ	GBMSZ	MSchaufel	GBM63Schaufel	GBM263Schaufel	GBMSchaufel	MM
1	26B0001	2	30	x	400	574	6,36	x	x	x	x	
5	26B0005	4	30	1	500	850	24,99	7938,1	641,42	660,42	x	
11	26B0011	7	30	1	x	x	x	7317,7	419,1	4401,49	x	
33	26B0033	5	50	1	x	x	x	5047,3	0	1254,51	392,17	

So sieht man, was sich geändert hat:

- **Rot** sind
 - der von Hand geänderte Wert (im Bild GMSZ = 850 bei 26B0005),
 - die Probennummer der geänderten Zeile,
 - jede berechnete Größe, die sich dadurch verschoben hat. Diese Größen stehen oben im Bild sowie im Reiter **Ergebnisse** und im Reiter **Pruefung**.
- **Hellblau unterlegt** ist die Probe, in der gerade getippt wird. Sie ist in allen Tabellen unterlegt und wird oben automatisch in den Blick gerollt.

Tastenkürzel

Die Tastenkürzel stehen auch im grauen **i** neben den Knöpfen der Rohwerte.

TRDF-Pruefmodul
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)

Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen
TRDF3.2 | Probenart Boden

Seri
2026B051
Abfragen

Untersuchungsmethode
TRDF3.2 (UM 42)

Load backup

Export

UM einfüegen ...

Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte

Ergebnisse

Pruefung

Exportbericht

Rohwertblatt CSV
Aenderungen CSV

☐ nur Eintraege mit Bewertung

Info
Maximieren
Anhang angleichen

Berechnete Groessen

4 von 4 Proben mit sauber

Berechnete Groessen

Blatt als CSV

Zeile

Probe

FBMMini LIMS

FBMMini ber.

FBMSZ LIMS

FBMSZ ber.

FBMSchaufel LIMS

FBMSchau

1

26B0001

x

x

565,9

565,9

x

x

5

26B0005

x

x

798,8

814,3

6549,7

6549,7

11

26B0011

x

x

x

x

2467,3

2467,3

33

26B0033

785,8

785,8

x

x

3738,1

3738,1

Tab / Pfeile / Eingabe

Zelle wechseln

Strg+C / Strg+V

kopieren / Block aus Excel einfüegen

Strg+D

Wert der Zelle darueber uebernehmen

Strg+Shift+D

Wert nach unten kopieren (bis zum Ende)

Strg+L

Wert nach unten, nur in leere Zellen

Strg+I

nach unten hochzaehlen (+1 je Zeile)

Strg+E

leere Zellen der Probe mit x fuellen

Strg+Shift+E

leere Zellen der Spalte mit x fuellen

Variante (_TRDV):
x = alles x,
0 = Zeile leeren,
1-7 = nicht benoetigte Felder bekommen x

Zeile

Probe

_TRDV

_TSM

FBFLFL

VOLSZ

GMSZ

GBMSZ

MSchaufel

GBM63Schaufel

GBM263Schaufel

GBMSchaufel

MM

1

26B0001

2

30

x

400

574

6,36

x

x

x

x

5

26B0005

4

30

1

500

850

24,99

7938,1

641,42

660,42

x

11

26B0011

7

30

1

x

x

x

7317,7

419,1

4401,49

x

33

26B0033

5

50

1

x

x

x

5047,3

0

1254,51

392,17

Taste	Wirkung
Strg+C / Strg+V	Zelle kopieren / Block aus Excel einfügen (läuft nach unten und rechts weiter)
Strg+D	Wert der Zelle darüber übernehmen
Strg+Shift+D	Wert nach unten kopieren, bis zum Ende der Spalte (überschreibt)
Strg+L	Wert nach unten kopieren, nur in leere Zellen
Strg+I	nach unten hochzählen : Wert, Wert+1, Wert+2 ...
Strg+E	leere Zellen der Zeile (Probe) mit x füllen
Strg+Shift+E	leere Zellen der Spalte mit x füllen

„Leer“ heißt: Es steht wirklich nichts da. Ein x bedeutet „hier soll nichts stehen“ und wird von Strg+L und Strg+E nicht überschrieben.

Spalte Variante (_TRDV)

Eingabe	Wirkung in der Zeile
x	alle Rohwerte bekommen x
0	alle Rohwerte werden geleert
1 - 7	die Felder, die diese Variante nicht braucht, bekommen x


Wird eine Variante mit Strg+Shift+D nach unten kopiert, wirkt sie in jeder Zeile.

5. Zusammensetzungsblock einer Probe

Ein **Klick auf die Probennummer** öffnet den Block der Probe als eigenes Fenster.

- Links die Probe im Boden: Feinboden, gewogener Grobboden 2-63 mm, geschätzter Grobboden > 63 mm.
- Rechts die Schaufelprobe nach Volumen.
- In der Mitte die Zahlen, aus denen gerechnet wird.

Der Block **rechnet bei jeder Eingabe live mit. Pfeil hoch/runter** blättert zur nächsten Probe.

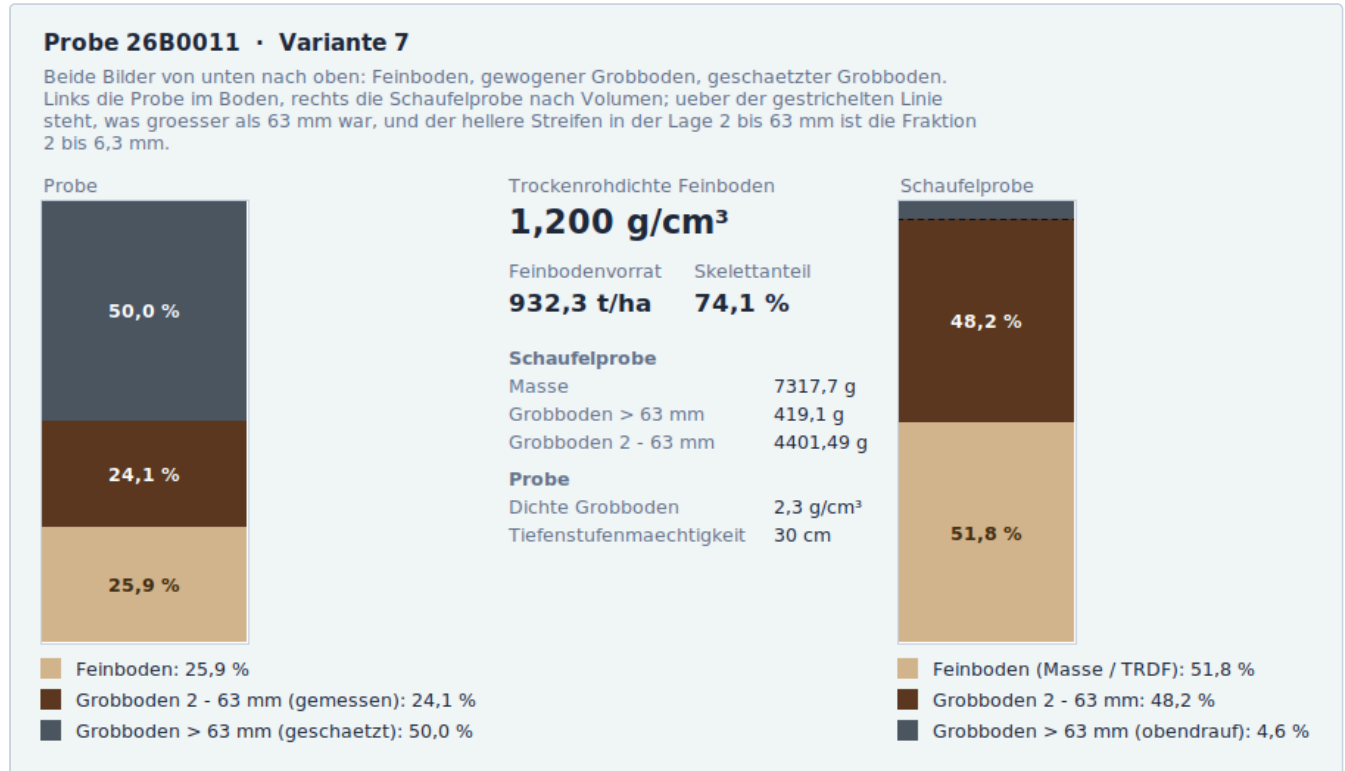

6. Prüfung und der Bereich „Bild“

Der Reiter **Pruefung** zeigt je Probe die bodenphysikalischen Werte und in der Spalte **Bewertung**, was auffällt. Dazu gehören:

- Skelettanteil außerhalb von 0-100 %,
- zu große Differenz zwischen gemessenem und geschätztem Skelettanteil,
- negativer Feinbodenvorrat,
- Trockenrohdichte außerhalb des Sollbereichs.

Amber markiert, was beanstandet wird, rot, was von Hand bewegt wurde.

TRDF-Pruefmodul pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat) Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen i TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie: Abfragen Untersuchungsmethode: Export

UM einfüegen ... Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte Ergebnisse Pruefung Exportbericht

Blatt als CSV ☐ nur Eintraege mit Bewertung Bild Info i 2 von 4 Proben ohne Befund | 2 zu pruefen

Zeile	Probe-Nr.	Skelettanteil	SKA63	SKAgs63	Faktor B/F	GBFAnt63gs	FBVorrat	TRDF	Cges	C03	
1	26B0001	0,6	x	x	x	x	4244,3	1,423	48,000	0,000	TRDF zu hoch
5	26B0005	16,4	13,1	16,4	1,000	10,0	4179,9	1,666	22,000	0,000	
11	26B0011	74,1	50,5	74,1	1,000	50,0	932,3	1,200	9,500	0,000	ggf. Differenz zu groß (hie
33	26B0033	23,6	16,1	23,6	1,000	9,0	5756,4	1,508	3,100	0,000	


Der Knopf **Bild** zeigt die **Trockenrohdichte über dem organischen Kohlenstoff**, alle Proben der Serie auf einmal.

- **Jeder Punkt** ist eine Probe.
- Die **blauen Bänder** sind der Sollbereich je Kohlenstoffklasse: das dunklere gilt ohne Carbonat, das hellere mit Carbonat.
- Farben der Punkte:
 - **rot** – liegt außerhalb des Sollbereichs,
 - **violett** – wurde von Hand bewegt,
 - **grau** – ohne Aufschluss (kein Cges); steht am linken Rand.
- **Ein Klick auf einen Punkt** öffnet den Zusammensetzungsblock dieser Probe.

So sieht man auf einen Blick, ob eine einzelne Probe herausfällt oder die ganze Serie an einer Klassengrenze liegt.

Serie 2026B051 · 4 Proben

Jede Probe ein Punkt, der Sollbereich ihrer Kohlenstoffklasse als Band dahinter: das dunklere gilt ohne Carbonat, das hellere mit. Rot liegt ausserhalb, violett wurde von Hand bewegt, grau hat keinen Aufschluss und steht am linken Rand. Ein Klick auf einen Punkt öffnet seinen Bodenblock.

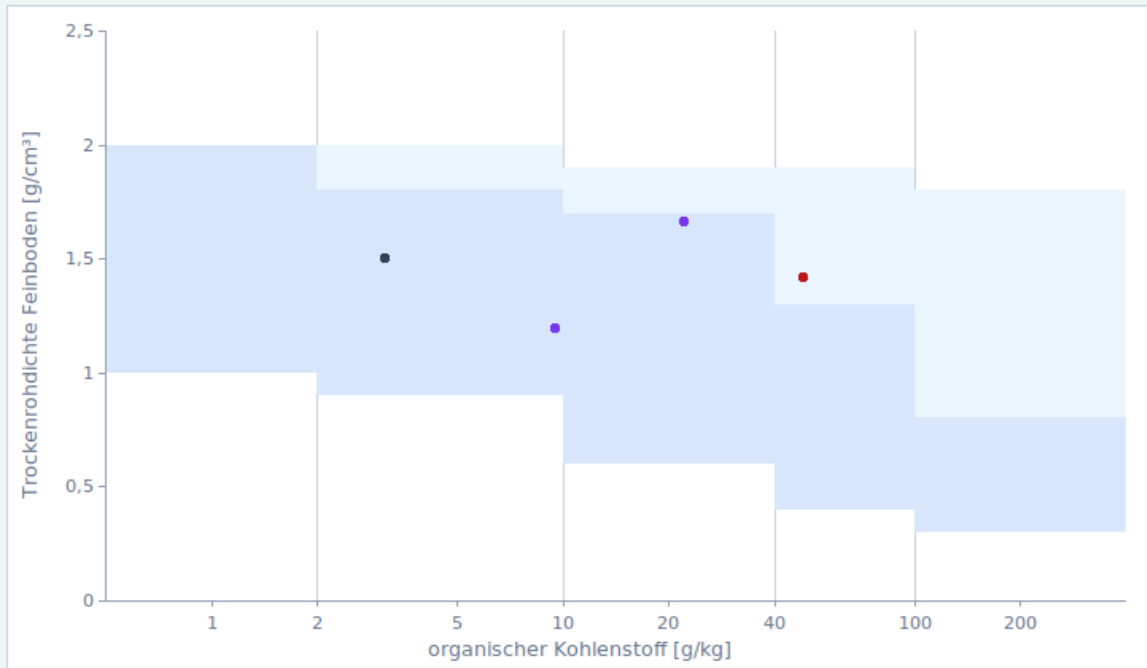

Der Reiter **Ergebnisse** zeigt je Größe nebeneinander, was im LIMS gebucht ist (**LIMS**) und was das Prüfmodul rechnet (**ber.**). Amber heißt, dass beides auseinandergeht; rot heißt, dass es von Hand bewegt wurde. **Ergebnisblatt als CSV** legt die Tabelle als Datei ab.

TRDF-Pruefmodul

pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)

Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen

TRDF3.2 | Probenart Boden

Load backup

Export

Serie2026B051

Abfragen

UntersuchungsmethodeTRDF3.2 (UM 42)

UM einfügen ...

Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte

Ergebnisse

Pruefung

Exportbericht

Ergebnisblatt als CSV

Info

Zeile	Probe	FBMMini LIMS	FBMMini ber.	FBMSZ LIMS	FBMSZ ber.	FBMSchaufel LIMS	FBMSchaufel ber.	VOLGB63gs LIMS	VOLGB63gs ber.	TRD_TRDF LIMS	TR
1	26B0001	x	x	565,9	565,9	x	x	x	x	1,423	1,
5	26B0005	x	x	798,8	814,3	6549,7	6549,7	10,0	10,0	1,635	1,
11	26B0011	x	x	x	x	2467,3	2467,3	50,0	50,0	1,800	1,
33	26B0033	785,8	785,8	x	x	3738,1	3738,1	9,0	9,0	1,508	1,

7. Daten an das LIMS senden

Senden

Export (grüner Knopf oben rechts) klicken. Gesendet werden:

- jeder **von Hand geänderte** Rohwert, der vom LIMS abweicht,
- jeder aus der eingefügten Untersuchungsmethode **vorgemerkte** Wert,
- jede **berechnete Größe**, die sich dadurch verschoben hat.

Abweichungen, die schon vorher bestanden, werden nicht automatisch gesendet.

Änderungen bestätigen

Vor dem Senden zeigt eine **Übersicht** jeden Wert einzeln: Probe, Größe, Art (Rohwert oder berechnet), Prüfmethode, Ziel, **Wert aktuell LIMS** und **Wert neu**.

- Gelb hinterlegte Zeilen haben im LIMS keine Ergebniszeile; sie werden nur gemeldet.
- Violett hinterlegte Zeilen wurden schon früher korrigiert.

Sichern und schreiben bestätigt, **Abbrechen** schreibt nichts.

19 Werte werden ueberschrieben

In ERGEBNISSE werden MW_ROH und MW mit demselben Wert geschrieben, dazu FC8 = „TRDF-Korrektur“, der Bearbeitungsstand und das Korrekturkennzeichen. Ein Rohwert haengt zusaetzlich am Teilprobenanhang - aus ihm rechnet das LIMS -, dort wird MW mitgesetzt und der bisherige Wert nach MW_OLD gehoben. Der Stand von jetzt geht vorher in den Ordner „trdf_backup“.

Zelle	Probe-Nr.	Groesse	Art	Pruefmethode	PM_ID	PM_VER	Ziel	Wert aktuell LIMS	Wert neu
5	26B0005	GMSZ	Rohwert	GMSZ	5	1	ERGEBNISSE + Anh:	834,300	850,000
5	26B0005	FBMSZ	berechnet	FBMSZTRDF3.2	1005	1	ERGEBNISSE	798,8	814,3
5	26B0005	TRD_TRDF	berechnet	TRD_TRDFTRDF3.2	1009	1	ERGEBNISSE	1,635	1,666
5	26B0005	_SKAS	berechnet	_SKASTRDF3.2	1007	1	ERGEBNISSE	12,9	13,1
5	26B0005	_SKASgs	berechnet	_SKASgsTRDF3.2	1006	1	ERGEBNISSE	16,3	16,4
5	26B0005	FBVS	berechnet	FBVSTRDF3.2	1003	1	ERGEBNISSE	4272,9	4345,0
5	26B0005	FBVSgs	berechnet	FBVSgsTRDF3.2	1002	1	ERGEBNISSE	4105,9	4179,9
5	26B0005	_SKA	berechnet	_SKATRDF3.2	1008	1	ERGEBNISSE	16,3	16,4
5	26B0005	FBVb	berechnet	FBVbTRDF3.2	1004	1	ERGEBNISSE	4105,9	4179,9
5	26B0005	VOLAntGB263	berechnet	VOLAntGB263TRDF3.2	1010	1	ERGEBNISSE	6,3	6,4
11	26B0011	TRDFgesch	Rohwert	TRDFgesch	15	1	ERGEBNISSE + Anh:	1,800	1,200
11	26B0011	TRD_TRDF	berechnet	TRD_TRDFTRDF3.2	1009	1	ERGEBNISSE	1,800	1,200

Sichern und schreiben **Abbrechen**

Nach der Bestätigung passiert Folgendes:

1. Der bisherige Stand wird gesichert, im Ordner **trdf_backup neben der exe** als Datei **<Serie> <Datum Uhrzeit>.csv**. Ohne Sicherung wird nicht geschrieben.
2. Ergebniszeile und Teilprobenanhang werden **in einem Schritt** geschrieben.
3. Es wird **nachgelesen**, ob jeder Wert angekommen ist. Eine Meldung nennt die Zahl der geschriebenen Zeilen. Werte, die danach noch wie vorher dastehen, werden ausdrücklich gemeldet.

Änderungsanzeige: der Exportbericht

Der Reiter **Exportbericht** zeigt den letzten Sendevorgang:

- je Probe eine Zeile, je geänderter Größe eine Spalte,

- in der Zelle **alt** → **neu**,
- zuerst die Rohwerte (rot, von Hand geändert), danach die berechneten Größen, die mitgewandert sind.

Darüber stehen Serie, Zeitpunkt, Anzahl und der Pfad der Sicherung. **Bericht als CSV** legt den Bericht neben die Sicherung.

TRDF-Pruefmodul

pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)

Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen

TRDF3.2 | Probenart Boden

Load backup

Export

Serie

2026B051

Abfragen

Untersuchungsmethode

TRDF3.2 (UM 42)

UM einfügen ...

Rohwerte aus: LIMS

19 Ergebniszeilen und 2 Rohwerte am Anhang geschrieben

Sicherung: G:\TRDF-Pruefmodul\trdf_backup\2026B051 2026-10-05 161200.csv

Rohwerte

Ergebnisse

Pruefung

Exportbericht

Bericht als CSV

2026B051 | 05.10.2026 16:34 | 2 Proben, 19 Werte

Sicherung: G:\TRDF-Pruefmodul\trdf_backup\2026B051 2026-10-05 161200.csv

Zeile	Probe-Nr.	GMSZ	TRDFgesch	FBMSZ	TRD_TRDF	_SKAS	_SKASgs	FBVS	FBVSgs	_SKA
5	26B0005	834,300 → 850,000		798,8 → 814,3	1,635 → 1,666	12,9 → 13,1	16,3 → 16,4	4272,9 → 4345,0	4105,9 → 4179,9	16,3 → 16,4
11	26B0011		1,800 → 1,200		1,800 → 1,200	60,5 → 50,5	79,1 → 74,1	2135,2 → 1782,7	1126,8 → 932,3	79,1 → 74,1

Rückgängig machen

Load backup klicken und die Datei aus `trdf_backup` wählen. Dieselbe Übersicht zeigt jetzt den umgekehrten Weg: „Wert neu“ ist der Stand von vor der Korrektur. **Zurueckspielen** stellt Ergebniszeile und Teilprobenanhang wieder her.

19 Werte werden ueberschrieben

Wiederhergestellt wird der ganze Stand von damals: MW_ROH und MW, der Bearbeitungsstand, das Korrekturkennzeichen und FC8 - und am Teilprobenanhang MW und MW_OLD. Eine neue Sicherung entsteht dabei nicht: die Datei, die gerade gelesen wird, ist sie.

Zeile	Probe-Nr.	Groesse	Art	Pruefmethode	PM_ID	PM_VER	Ziel	Wert aktuell LIMS	Wert neu
5	26B0005	GMSZ	Rohwert	GMSZ	5	1	ERGEBNISSE + Anh	850,000	834,300
5	26B0005	FBMSZ	berechnet	FBMSZ	1005	1	ERGEBNISSE	814,3	798,8
5	26B0005	TRD_TRDF	berechnet	TRD_TRDF	1009	1	ERGEBNISSE	1,666	1,635
5	26B0005	_SKAS	berechnet	_SKAS	1007	1	ERGEBNISSE	13,1	12,9
5	26B0005	_SKASgs	berechnet	_SKASgs	1006	1	ERGEBNISSE	16,4	16,3
5	26B0005	FBVS	berechnet	FBVS	1003	1	ERGEBNISSE	4345,0	4272,9
5	26B0005	FBVSgs	berechnet	FBVSgs	1002	1	ERGEBNISSE	4179,9	4105,9
5	26B0005	_SKA	berechnet	_SKA	1008	1	ERGEBNISSE	16,4	16,3
5	26B0005	FBVb	berechnet	FBVb	1004	1	ERGEBNISSE	4179,9	4105,9
5	26B0005	VOLAntGB263	berechnet	VOLAntGB263	1010	1	ERGEBNISSE	6,4	6,3
11	26B0011	TRDFgesch	Rohwert	TRDFgesch	15	1	ERGEBNISSE + Anh	1,200	1,800
11	26B0011	TRD_TRDF	berechnet	TRD_TRDF	1009	1	ERGEBNISSE	1,200	1,800

Zurueckspielen

Abbrechen

8. Ansicht einrichten und Blätter

- **Info** öffnet die Legende einer Tabelle. Dort lassen sich festlegen:
 - eigene Beschreibungen der Spalten,
 - die Spaltenreihenfolge (ziehen),
 - welche Spalten fest stehen bleiben und welche ausgeblendet sind,
 - was in der Kopfzeile steht.

Gespeichert wird in `einstellungen\` neben der exe; beim nächsten Start ist alles wieder da. Ebenso gemerkt werden die zuletzt abgefragte Serie und ob die berechneten Größen aufgeklappt sind.

- Die blauen **i** erklären, was eine Tabelle zeigt; das graue **i** listet die Tastenkürzel.
- Als CSV ablegen lassen sich **Rohwertblatt**, **Aenderungen**, **Ergebnisblatt**, das **Blatt** im Reiter Pruefung und der **Bericht**. Ablage im Ordner `TRDF-Pruefung` bzw. `trdf_backup` neben der exe.